

Кресло гинекологическое КГ-3М

Кресло гинекологическое КГ 3м используется для размещения на нем пациенток для выполнения гинекологических обследований, проведении мелких хирургических вмешательств, а также принятия различных процедур.



Кресло гинекологическое КГ-3М

© www.dzmo.ru

Основные технические характеристики:

длина, мм	1122
ширина, мм	500
высота, мм	1650
масса (не более), кг	70
масса брутто (не более), кг	105
допустимая нагрузка, кг	180
размеры упаковки из гофрокартона, мм	910x550x1650,
объем, куб.м.....	0,83
размеры обрешетки из дерева, мм	1010x650x1750
объем, куб.м.....	1,15

Высота сиденья над полом постоянная (фиксированная) - 900 мм.

Регулирование углов наклона производится посредством пневматических пружин:

- спинки от вертикального направления - от 20° до 100°;
- сиденья от горизонтального направления - от 0° до 20°.

Металлокаркас кресла гинекологического КГ-3м изготовлен из стального профиля прямоугольного сечения с нанесенным на него экологически чистым полимерным порошковым покрытием, устойчивым к неоднократной обработке легкодезинфицирующими растворами, которые применяются в медицинских учреждениях.

Мягкие компоненты тазовой и спинной секций изготавливаются из пенополиуретана толщиной 50 мм и обтянуты кожзаменителем (винилискожей).

Боковые направляющие для установки приспособлений, а также сами съемные приспособления изготовлены из стали с нанесением гальванического защитного декоративного покрытия.

Подколенники кресла гинекологического кг-3м выполнены из профиля, изготовленного из стали и обтянутого гигиеничным чехлом из кожзаменителя (винилискожи) с уплотнением из пенополиуретана. В комплектацию подколенников входят ремни, которые служат для фиксации голени.

Упоры для рук и подколенники фиксируются в направляющих втулках на металлокаркасе сиденья, могут регулироваться по высоте с последующим закреплением с помощью зажимов.

Емкость для сбора жидкости выполнена из нержавеющей стали. Сосуд располагается в cassette, расположенной под основанием тазового сегмента изделия. Поэтому емкость неизменно находится в горизонтальном положении, несмотря на изменение угла наклона сиденья, что не мешает положению пациентки в кресле.

По требованию клиентов кресло гинекологическое кг-3м может быть скомплектовано тазиком со сливом или без слива.


Поворотная подставка для ног закреплена на металлической раме основания, которое установлено на два ролика и две опоры.

Кресло гинекологическое кг-3м поставляется в сборе: в упаковке из картона - 91x55x165 см, в коробе из дерева - 163x80x105 см.

Стандартное комплектование:

- подколенники - 2 шт.
- подножка
- тазик из стали нержавеющей
- упоры для рук - 2 шт.

Медицинское оборудование в Красноярске

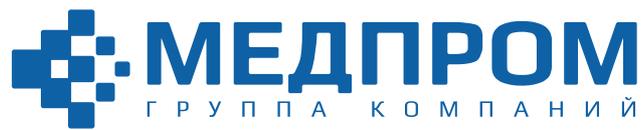

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 31-4

Тел. +7 (391) 286-15-52

krasmedprom@gmail.com, www.gkmedprom.ru