

BeneView T1

Мобильное решение для мониторинга

Материалы и информация, содержащиеся в этой брошюре, распространяются в различных государствах, но не все указанные здесь изделия или услуги обязательно доступны в вашей стране или регионе. За справками о наличии соответствующих изделий или услуг обращайтесь в местные офисы или к представителям компании.

Mindray Medical Netherlands B.V.
Drs.W.van Royenstraat 8, P.O. Box 26 3870 CA Hoevelaken,
The Netherlands
Тел.: (31-33) 254-4911
Факс: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.
Via Girardo Patecchio, 4 20141 Milano Italy
Тел.: (39-02) 57-402-444
Факс: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.
Avenida Manóteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain
Тел.: (34-91) 392-3754
Факс: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH
Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim
Тел.: (49) 6251-17524-0
Факс: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited
3 Percy Road, St Johns Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6SZ United Kingdom
Тел.: (44) 1480 416 840
Факс: (44) 1480 436 588

Mindray Medical France SARL
Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Тел.: (33-1) 4513-9145
Факс: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Rus Co.Ltd
Россия, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 41
Тел.: (7-499) 553-6036
Факс: (7-499) 553-6039
«Горячая линия»: 8-800-333-5323

Mindray Medical Colombia S.A.S
Room No.702, Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Тел.: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil - Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP, CEP 05012-020
Тел.: (55 11) 3124-8026

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.
Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur
Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.
Тел.: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Факс: (52) 55 56 62 65 97

PT.Mindray Medical Indonesia
Menara Dea 1, Suite 301, Kav E4 No.3/1, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Тел.: +6221 5762650
Факс: + 6221 5762655


Mindray Medical Egypt
Ground Floor, 11 El Imam Metwally El Sharawi Street, Sheraton
Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Тел.: + 2 02 22609728
Факс: + 2 02 22609769

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)
401/402, NDM-1, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Center,
New Delhi - 110034
Тел.: +91 11 4923 0000
Факс: +91 11 4923 0030
Бесплатный звонок: 1800 10 20 300

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)
B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai,
400 059, India
Тел.: (91-22) 4020-0000
Факс: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.
Yenibosna, Köyaltı Mevkii, 29 Ekim Cad., No.1 Kuyumcukent 2 No.lu
plaza, 3. Kat, No:1-9 Bahçelievler Istanbul, Turkey
Тел.: (90-212) 482 08 77
Факс: (90-212) 482 08 78

Mindray Medical Thailand Limited
Thai Summit Tower Co., Ltd., No. 1768, New Phetchaburi Road,
Bang Kapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok

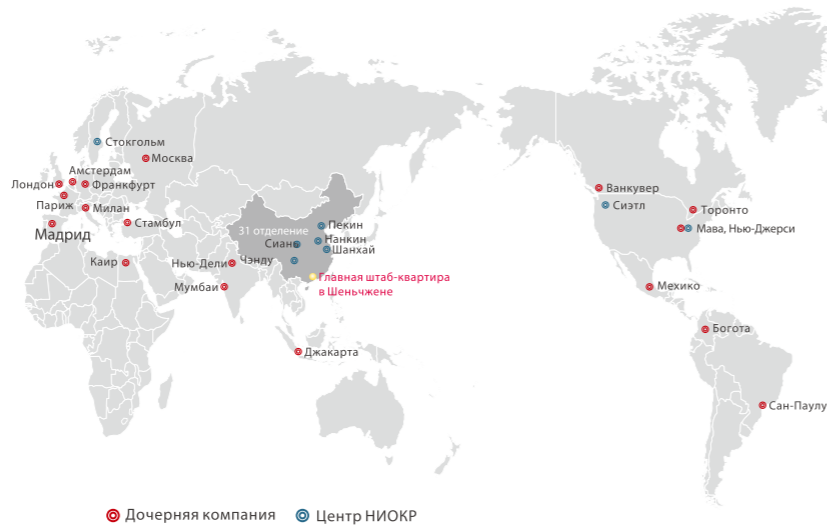

● Дочерняя компания ● Центр НИОКР



BeneView T1

Монитор пациента



Ваш мобильный помощник при транспортировке пациентов

mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2010-2011 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N:RU-BeneView T1-210X285x4P-20111212

mindray
healthcare within reach

Мобильность, отвечающая вашим потребностям



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

Ориентированный на пациента. Монитор пациента BeneView T1 предназначен для сопровождения пациента при его транспортировке к месту лечения. В качестве прикроватного монитора он функционирует как многофункциональный модуль, являющийся частью основного устройства BeneView. Монитор BeneView T1 можно легко отключить для использования при транспортировке пациента, помимо этого, он может функционировать как автономный монитор пациента.

Простой в использовании. Мобильный модуль BeneView T1 создан на платформе монитора пациента BeneView. Интуитивно понятный интерфейс пользователя и эргономичный дизайн облегчают освоение монитора T1 и делают его простым в использовании.

Многофункциональный. Монитор T1 совместим со всеми мониторами пациента BeneView, в нем используется удобная и простая технология «plug and play».

Автоматический контроль яркости обеспечивает оптимальные условия для просмотра данных при любом освещении.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Широкие возможности мониторинга. Монитор BeneView T1 подходит для пациентов различной степени тяжести. T1 позволяет проводить мониторинг целого ряда физиологических параметров, включая ЭКГ, НАД, температуру, SpO₂, и АД и EtCO₂. Также он позволяет регистрировать ЭКГ в 12 отведениях, СВ и PICO.

Полностью настраиваемый 5-дюймовый экран обеспечивает отображение до 12 кривых, позволяя проводить всестороннюю оценку состояния пациента во время транспортировки.

Эффективное управление данными. Монитор T1 обеспечивает до 48 часов записи полномасштабной кривой ЭКГ и данных. Медработники могут получать и просматривать до 120 часов записи графических и табличных трендов* в дополнении к 1000 измерений НАД.

Настраиваемые пользователем конфигурации могут быть сохранены на USB-накопителе и загружены в другой монитор BeneView T1.

* С интервалами в 1 минуту

Высокоэффективный мобильный модуль и универсальный монитор

КОМПАКТНЫЙ

Легкий для переноски. Поскольку вес компактного монитора T1 составляет менее 1 кг*, он обладает высокой портативностью.

Встроенный литий-ионный аккумулятор рассчитан приблизительно на 5 часов непрерывного мониторинга. Аккумулятор можно перезаряжать при помощи основного устройства BeneView, адаптера переменного тока или зарядного устройства. Во время замены аккумулятора работа монитора не будет прерываться.

Работа с помощью одной руки. Монитор BeneView T1 прекрасно помещается в одной руке, что позволяет освободить вторую руку для работы с функциональным сенсорным экраном.

Различные варианты размещения. Множество вариантов размещения повышает мобильность монитора. T1 оснащен эргономичной ручкой для переноски и может быть легко установлен на спинке кровати или стойке.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Усовершенствованные возможности сетевого подключения. Монитор BeneView T1 обеспечивает непрерывную передачу данных пациента даже во время транспортировки. При отключении от монитора BeneView модуль T1 автоматически соединяется с центральной системой мониторинга Hypervisor VI при помощи встроенного устройства WiFi.

Функция просмотра данных другого пациента системы BeneView позволяет получать данные пациента в режиме реального времени от монитора T1.

Интеллектуальная синхронизация данных. Все данные, полученные во время транспортировки пациента, автоматически будут загружены в центральную систему мониторинга, когда модуль T1 будет снова подключен к монитору пациента BeneView.

